

「ムンプスウイルス IgG」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、下記項目につきまして検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

● 489 ムンプスウイルス IgG

変更内容	新	現	備考 (総合検査のご案内)
検査方法	EIA	同左	測定試薬販売中止に伴う試薬の変更、反応性向上
基準値 (単位)	陰性(-) EIA価 2.0未満	同左	
報告範囲	2.0未満、2.0~127、128以上	同左	
報告桁数	有効3桁、整数5桁、小数1桁	同左	
備考	固相法: 髄液は測定可能ですが、参考値となります。 検体量 0.4 mL (冷蔵)	固相法: 髄液の測定も可能です。 検体量0.4 mL (冷蔵) 基準値 陰性(-) EIA価 0.20未満	

P.57

変更期日


● 令和5年4月1日(土)受付日分より

●ムンプスウイルス IgG

測定試薬の販売終了、新試薬販売により測定試薬を変更いたします。新試薬は現試薬と比較して反応性が向上(判定保留の減少)しております。これに伴い、検査方法、代表材料の基準値の変更等はありませんが、髄液について性能検証、基準値の確認が出来ないため、参考値コメントを付与させていただきます。

エスアールエル検討データ

●相関図

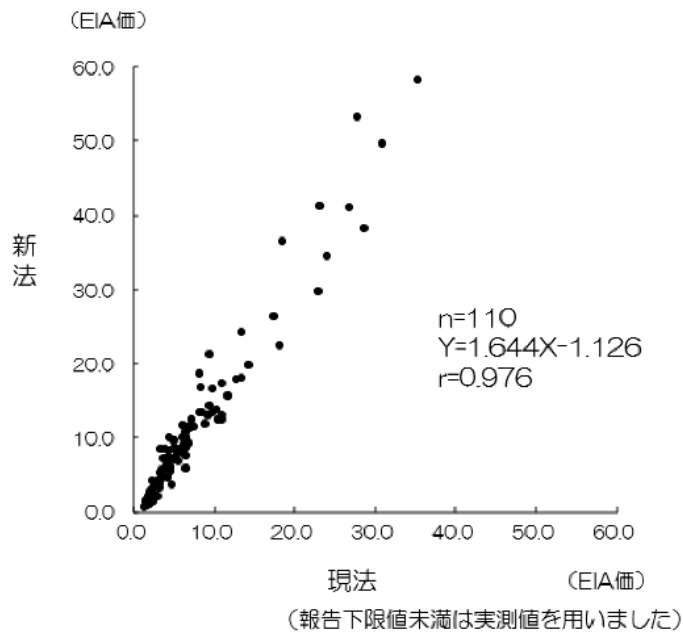

●相関一致表

		現法		
		(-) 2.0未満	(±) 2.0~3.9	(+) 4.0以上
新法	(-) 2.0未満	8	4	0
	(±) 2.0~3.9	1	15	1
	(+) 4.0以上	0	13	68

一致率：82.7% (n=110)

●参考文献

尾崎 隆男, 他:臨床とウイルス 50(3):129~133, 2022. (検査方法参考文献)